

ZERKLEINERN

FRITSCH

PARTIKELMESSEN TEILEN MILLING PARTICLE SIZING DIVING ZERKLEINERN PARTIKELMESSEN TEILEN MILLING PARTICLE SIZING DIVING

ドイツ製 フリッチュ社 モーターグラインダー P-2



P-2 WEBサイト




自動乳鉢方式

マイルドな条件で粉碎
や混合処理が可能



材質は7種類

試料に合わせて材質を
選択可能

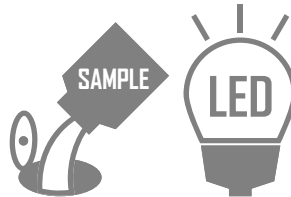

小窓・LED照明付

試料の継ぎ足しや
粉碎過程の観察が容易

P-2 MORTAR GRINDER

<http://www.fritsch.co.jp>

特長



自動乳鉢方式

乳鉢側が回転するタイプ。最大175Nの垂直圧力と最大273Nの壁面圧力が設定できます。



小窓・LED照明

粉碎中に、LEDランプが点灯して粉碎経過を観察できます。さらに上部カバーの小窓から試料や溶媒を継ぎ足しすることが可能です。



簡単に取り外し可能

乳鉢と乳棒は、工具無しで取り外しができます。清掃や試料の回収が素早く簡単に行うことができます。




7種類の材質

乳鉢+乳鉢セットは7種類の材質を用意しています。



湿式粉碎

乾式・湿式粉碎どちらも対応しています。溶媒を滴下しつつ処理も可能です。

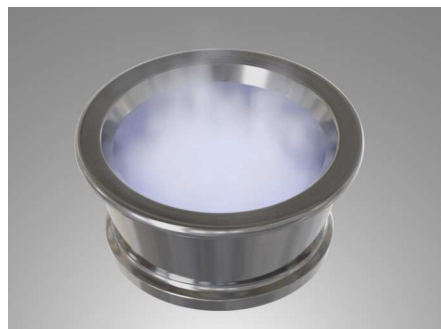

冷凍粉碎

液体窒素を添加することで冷凍粉碎が可能です。
※ステンレス粉碎セットのみ対応

粉碎方法

乳鉢(下側)が回転します。乳棒の垂直圧力及び壁面圧力によって、強い摩擦力と圧力で試料を粉碎します。合成ゴム製のスクレーパーによって、試料を乳鉢の下部に集めることで、軟硬な試料や粘りのある試料といった幅広い試料に対応できます。



乳鉢・乳棒の材質

材質 (乳鉢+乳棒)	硬質磁器
	シントードアルミナ
	メノー
	ジルコニア
	ステンレススチール
	クロームスチール
タングステンカーバイド	

仕様

装入試料サイズ	最大 8mm
処理量	最大190mL
使用分野	鉱物、冶金、ガラス、セラミックス、土壌、食品、製剤、火薬など
電源	単相 100~120V, 300W 単相 200~240V, 300W
重量	24kg
寸法	W31 x D46 x H41 cm

※商品改良や仕様変更に伴い、やむを得ずに商品の一部形状や色を予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。

お問い合わせ

フリッチュ・ジャパン株式会社



横浜本社 横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル6階
TEL: 045-641-8550 / FAX: 045-641-8364
大阪営業所 大阪市淀川区西中島7-2-7 大西ビル6階
TEL: 06-6390-0520 / FAX: 06-6390-0521
福岡営業所 福岡市西区福重5-4-2 アザリアS姪浜403
TEL/FAX: 092-707-6131
MAIL: info@fritsch.co.jp / URL: <http://www.fritsch.co.jp>

★保守・修理対応は最寄りの営業所までお問い合わせください。